

drive

www.drivemedical.com

Stapelbare Badewannenstufe
stackable bath bench
escalón apilable para baño
marchepied empilable pour
la baignoire



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Eiland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

drive

Die Badewannenstufe von Drive erleichtert den Einstieg in die Badewanne sowie den Ausstieg. Die Badewannenstufe von Drive hat eine große, ebene und rutschfeste Trittfläche mit einem rutschsicheren Belag. Zwei oder mehr Stufen können aufeinander gestellt werden, um die Stufe zu erhöhen. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen.


Anleitung

Beim Aufeinanderstellen der Stufen folgende Anweisungen beachten:

1. Die Badewannenstufe auf eine ebene Fläche stellen.
2. Mit einer Münze die 4 weißen Stopfen oben auf der Badewannenstufe herausnehmen. Diese zur späteren Verwendung aufheben.



3. Die zweite Badewannenstufe auf die erste setzen: dabei die Stifte auf der Unterseite der Stufe über die Aufnahmeöffnungen bringen. Fest herunterdrücken, um die Stufe zu fixieren.

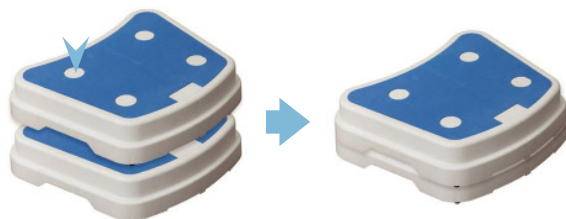

Einjährige Produktgarantie

Ihr Produkt der Marke Drive verfügt über eine einjährige Garantie auf Material und Herstellung für den Erstverbraucher und -käufer.

Dieses Gerät wurde nach höchsten Anforderungen hergestellt und vor dem Versand genauestens geprüft. Die einjährige Produktgarantie ist Ausdruck unseres Vertrauens in Material und Herstellung unserer Produkte und gewährleistet dem Kunden einen langjährigen zuverlässigen Einsatz.

Diese Garantie gilt nicht für Mängel aufgrund falscher oder fahrlässiger Verwendung oder für normalen Verschleiß. Die Garantie gilt nicht für nicht dauerhafte Teile, wie Gummizubehör, Rollen und Griffe, die einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind und regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Wenn sie Fragen zu Ihrem Geräte der Marke Drive oder zu dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler.



Distributor:
DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3
D-68309 Mannheim • Germany
kontakt@devilbisshc.com • www.drivedevilbiss-int.com
Tel: +49 (0) 621 17898-0 • Fax: +49 (0) 621 17898-111

Manufacturer: Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Heathfield Lane • Birkenshaw • West Yorkshire
BD 112 HW • info@drivedevilbiss.co.uk
www.drivedevilbiss.co.uk • Tel.: 0845 0600 333

The Drive Bath Step is designed to make getting in and out of the bath or tub easier. The Drive Bath Step features a large flat slip proof stepping surface with built-in non-slip pads. Two or more steps can be combined to raise the height of the steps by following the instructions below.


instructions

To combine bath steps, follow the instructions below.

1. Place bath step on flat surface.
2. Using a coin, remove each of the 4 white circles located on the top of the bath step. Store these for future use.



3. Place second bath step on top of first, lining up prongs on underside of step with receptacle holes. Press down firmly to secure in place.

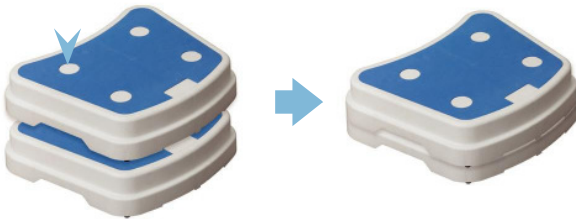

1 year limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This 1 year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



Distributor:
DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3
D-68309 Mannheim • Germany
kontakt@devilbisshc.com • www.drivedevilbiss-int.com
Tel: +49 (0) 621 17898-0 • Fax: +49 (0) 621 17898-111

Manufacturer: Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Heathfield Lane • Birkenshaw • West Yorkshire
BD 112 HW • info@drivedevilbiss.co.uk
www.drivedevilbiss.co.uk • Tel.: 0845 0600 333

El escalón de baño Drive está diseñado para entrar y salir de la bañera o tina con más facilidad. El escalón de baño Drive cuenta con una superficie para pisar grande y plana que cuenta con almohadillas antideslizantes integradas. Se pueden combinar dos o más escalones para elevar la altura de los escalones siguiendo las instrucciones de abajo.


instrucciones

Para combinar los escalones de baño, siga las siguientes instrucciones.

1. Coloque el escalón sobre una superficie plana.
2. Con una moneda, quite cada uno de los cuatro círculos de color blanco situados en la parte superior del escalón. Guárdelos para usarlos en el futuro.



3. Coloque el segundo escalón sobre el primer escalón, alineando las puntas en la parte inferior del escalón con los agujeros del receptáculo. Presione con firmeza hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

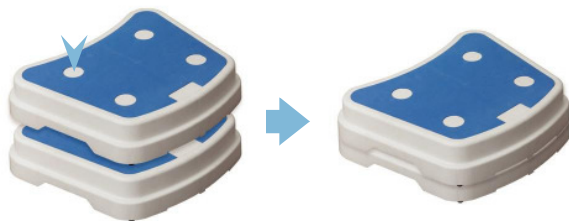

garantía limitada por 1 año

Su producto marca Drive está garantizado de no tener defectos en los materiales y la fabricación por 1 año desde la compra por el consumidor original.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Estos 1 año de Garantía Limitada son una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas al uso o negligencia por parte del propietario, o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



Distributor:
DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3
D-68309 Mannheim • Germany
kontakt@devilbisshc.com • www.drivedevilbiss-int.com
Tel: +49 (0) 621 17898-0 • Fax: +49 (0) 621 17898-111

Manufacturer: Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Heathfield Lane • Birkenshaw • West Yorkshire
BD 112 HW • info@drivedevilbiss.co.uk
www.drivedevilbiss.co.uk • Tel.: 0845 0600 333

Le marchepied pour la baignoire Drive est conçu pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Le marchepied pour la baignoire Drive possède une grande surface plane antidérapante et des pieds intégrés tout aussi sécuritaires. Vous pouvez empiler deux marchepieds ou plus pour augmenter la hauteur totale, en suivant ces instructions.


instructions

Suivez ces instructions pour empiler les marchepieds.

1. Placez le marchepied sur une surface plane.
2. À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez les quatre capuchons blancs situés sur le dessus du marchepied. Conservez-les pour un usage futur.



3. Placez un second marchepied sur le premier, en alignant les pattes sous le marchepied dans les trous. Appuyez fermement pour les joindre solidement.

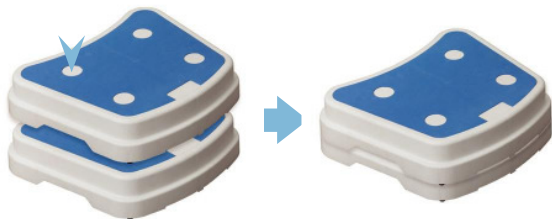

garantie limitée de 1 an

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 1 an reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments de durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.



Distributor:
DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3
D-68309 Mannheim • Germany
kontakt@devilbisshc.com • www.drivedevilbiss-int.com
Tel: +49 (0) 621 17898-0 • Fax: +49 (0) 621 17898-111

Manufacturer: Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Heathfield Lane • Birkenshaw • West Yorkshire
BD 112 HW • info@drivedevilbiss.co.uk
www.drivedevilbiss.co.uk • Tel.: 0845 0600 333