

L'UTILISATION PREVUE

Le masque PPC est conçu pour être utilisé par des patients qui ont reçu une prescription pour la thérapie PPC ou Ventilation et sont suivis régulièrement par leur médecin. Le masque est utilisé avec les dispositifs PPC ou Ventilation, à domicile, à l'hôpital ou dans les instituts de soins.

CONTRE-INDICATIONS

Ce masque pourrait ne pas être approprié pour les patients avec les conditions médicales suivantes : valve cardiaque affaiblie, reflux excessif, réflex tussif diminué, hernie. Le masque est à proscrire si le patient est non répondant, incapable d'enlever le masque ou reticent.

AVERTISSEMENT

- Ce masque doit être utilisé uniquement avec des systèmes PPC prescrits par votre médecin ou votre pneumologue.
- Le masque doit être utilisé uniquement quand le système PPC a été allumé et en parfait état de fonctionnement.
- Ne bloquez pas les valves ventilations et les fentes d'expirations.

REMARQUES : Les systèmes PPC sont conçus pour être utilisés avec un masque spécial possédant des valves qui assurent le flux continu de l'air hors du masque. Lorsque le dispositif PPC fonctionne correctement, l'air du dispositif pousse l'air expiré à travers les fentes d'expiration. Cependant, quand le dispositif PPC ne marche pas, il n'y a pas suffisamment d'air frais qui passé au travers du masque et il est possible de respirer de l'air expiré. Dans certaines circonstances l'utilisation de cet air expiré pendant plusieurs minutes peut entraîner une suffocation.

- Pour l'utilisation de oxygène avec le traitement PPC, l'arrivée d'oxygène doit être fermée quand le dispositif PPC n'est pas en fonctionnement.

REMARQUES : Quand le dispositif PPC n'est pas en marche et que l'arrivée d'oxygène est ouverte, l'oxygène délivré dans les tuyaux de ventilation peut s'accumuler au sein du dispositif PPC et occasionner un risque d'incendie.

REMARQUES : Avec un débit fixe d'oxygène supplémentaire, la concentration d'oxygène inspiré peut varier en fonction du patient et les fuites masques.

- Ne pas fumer si l'oxygène est utilisé.
- Contactez votre médecin en cas de douleurs pulmonaires, respiration difficile, dysfonctionnement gastrique ou maux de tête.
- Ne pas manger ou boire 3 heures avant l'utilisation du masque afin de minimiser le risque de vomissement pendant le sommeil.
- Ne pas utiliser ce masque lors de la prise de médicament pouvant entraîner des vomissements.

ATTENTION : Lors de l'utilisation du dispositif PPC à de faibles pressions, le débit à travers les fentes d'expirations peut être insuffisant pour extraire l'air expiré dans le tuyau, l'inhalation de cet air expiré est possible.

- Doit être utilisé uniquement par les personnes ayant reçu une formation adéquate et les instructions de personnel médical qualifié.
- L'utilisation cumulée de ce produit avec d'autres appareils médicalisés pourraient altérer la performance du masque.

ATTENTION

La loi fédérale des Etats-Unis limite la vente de ce dispositif uniquement par le biais ou l'intermédiaire du médecin.

L'utilisation de javel, de chlore, d'alcool ou des solutions parfumées peut détériorer les matériaux et réduire la durée de vie du produit.

DONNÉES TECHNIQUES

- En silicone moulé, petit léger et confortable.
- Masque transparent permettant une bonne visibilité de la zone nasale.
- Volume perdu réduit dans le masque lors de faible concentration de CO2.
- Rotation de 360 degré au point d'attachement du masque et du tuyau (standard 22mm).
- Le harnais avec des attaches Velcro fournit une flexibilité et un mouvement optimal.

LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Détachez le harnais du masque.
- Lavez doucement à la main dans l'eau chaude avec un détergent doux. Bien rincer le masque et les autres éléments. **REMARQUE :** le harnais doit être lavé à la main uniquement. Utilisez un savon doux et frottez-le délicatement dans de l'eau chaude à 30 °C. Le lavage en machine et le repassage sont interdits.
- Laissez le masque et les composants sécher à l'air libre avant de les reutiliser. Ne le laissez pas en plein soleil.
- En cas de fissures, détériorations ou décoloration excessive, il faut remplacer le masque.
- Il est possible de nettoyer le D150 dans un lave-vaisselle s'il est placé dans le panier supérieur.


Dimensions : Masque assemblé (sans le harnais) : 177 mm (H), 97 mm (L), 100 mm (P)

Poids : Masque et harnais : 120 g; Harnais : 31 g

Matériaux utilisés :

Cadre du masque : Polycarbonate (PC) Coussinet frontal : Silicone
Harnais : Nylon et élasthanne Coussins : Silicone

Aucun des composants du masque ne contient du latex. Ce produit ne contient pas de PVC ni de phtalates.

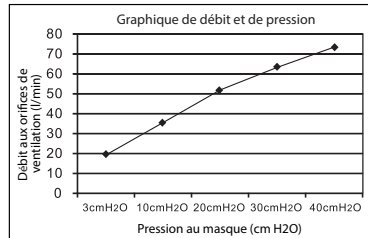

RÉSISTANCE DE FLUX (cmH ₂ O)	50LPM	100LPM
D150F	0,29	0,86


MODÈLE	VOLUME (ML)
D150F-S	210,6
D150F-M	251,5
D150F-L	282,5

- Taux d'humidité limite pour le stockage: <85%
- Plage des températures de fonctionnement: -18°C ~ 50°C
- Température de de transport: -40°C ~60°C


Durée de vie utile prévuee

- Composants du cadre du masque = 6 mois
- Harnais = 3 mois
- Coussinets du masque = 3 mois


Merci de suivre les instructions de montage ci-dessous:

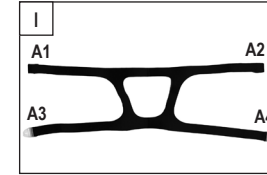

Mettre le harnais avec le Velcro en dessous sur une surface plane. Détachez les bandes velcros A1 et A2.

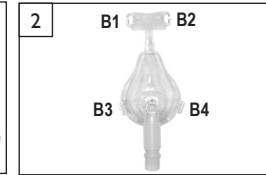

Identifiez les positions de fermeture du harnais sur le masque.

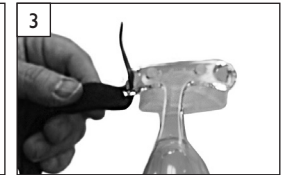


Passez la sangle supérieure du harnais A1 à travers le trou du masque B1. Le Velcro doit faire face à l'extérieur.



Attachez les bandes Velcro.




Passez la sangle supérieure du harnais A2 à travers le trou du masque B2. Le Velcro doit faire face à l'extérieur. Attachez le Velcro.

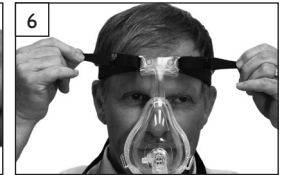

Passez le harnais sur la tête et ajustez les deux sangles supérieures pour obtenir un ajustement confortable.



Accrochez le clip plastique A3 au point B3 sur le masque. Répétez le processus pour A4 et B4.

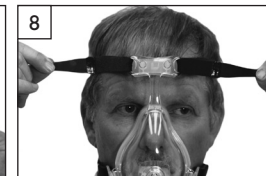

Ajustez les deux sangles supérieures A1 & A2 pour obtenir un ajustement confortable.



Ajustez les deux sangles inférieures A3 & A4 pour obtenir un ajustement confortable.



Assurez que la sangle au-dessus soit bien positionnée pour éviter le glissement du harnais.

- Remarque:** Il n'est pas nécessaire de défaire les bandes de Velcro pour nettoyer le masque. Décrocher simplement les clips du masques et retirer les attaches du harnais sur le corps du masque. Les remettre après le nettoyage.
- Pour retirer le masque et le harnais, décrochez les clips du masque et tirez la sangle supérieure sur la tête.
- Pour réutiliser le masque et le harnais, tirez la sangle supérieure sur la tête et accrochez les clips de fixation.
- Ce produit ne nécessite pas de maintenance.